


車いす

車いすを使用することで、外出や長い距離の移動を快適にするとともに、介助者の負担も軽減することができます。

利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます

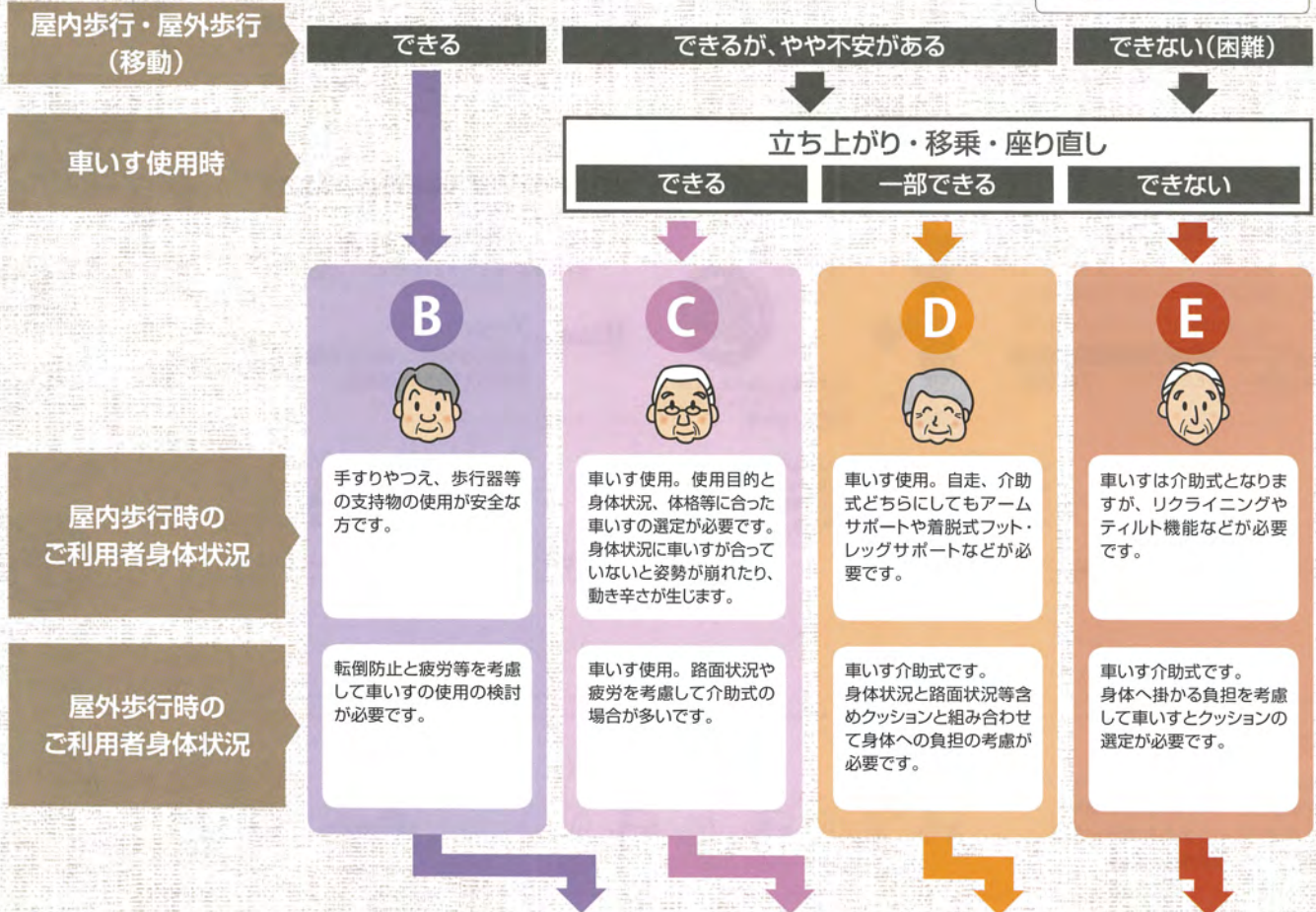

手動車いす	自走式 参照 P.40 ご本人が操作して駆動させるタイプ		屋内				
			屋外				
	介助式 参照 P.44 介助者が押して駆動させるタイプ		屋内				
			屋外				
	リクライニング式 ティルト式 参照 P.48 リクライニング/ティルト機能付き		屋内				
			屋外				
電動車いす	電動 参照 P.50 操作レバーによる駆動/介助者による操作が可能なタイプも		屋内				
			屋外				
	電動カート 参照 P.50 ハンドル操作で駆動 歩行者扱いに		屋内				
			屋外				

車いすの名称と機能



車いすシーティングについて


利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる(他の福祉用具やクッションなどを併用する場合があります)ことを車いすシーティングといいます。

車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。

身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安

a 座シート幅	① 座位臀幅に0～3cmを足します。
b 座シート奥行	② 座底長から5～7cm引きます。
c アームサポート高さ	③ 座位肘頭高に1～2cm足します(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
d フット・レッグサポート長さ	④ 座位下腿長(必要に応じてクッションの厚さを引きます)に合わせます。
e バックサポート高さ	⑤ 座位腋下高から7～10cm引きます(必要に応じてクッションの厚さを加えます)。
f 前座高	④ 座位下腿長に2～5cm足します(必要に応じてクッションの厚さを引きます)。
g グリップ高さ	介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。

■車いす寸法

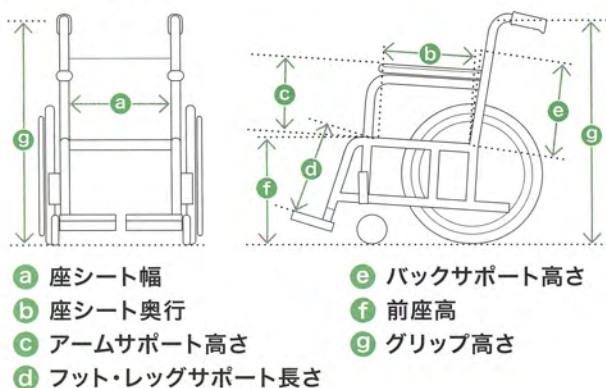

■身体寸法



自走式

各種オプションは51ページをご覧ください。

標準タイプ

KK-T540

自走式


パラマウントベッド

シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



ピンク

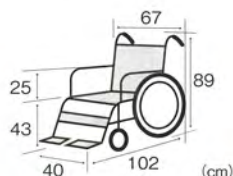

- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 35cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	67 cm	43 cm	15.7 kg

色	型式	商品コード	TAIS コード
ブルー	KK-T540MA	726680	00170-000624
ピンク	KK-T540MM	726685	00170-000625

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

非課税

幅狭タイプ


SKT-4

自走式

ミキ

人気のスキットに自走用登場
狭い室内もスイスイ移動でき、
ちょっとしたスペースにも
収納できます

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

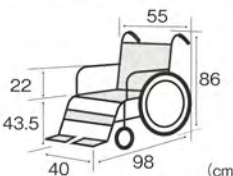

- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 28.5cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43.5 cm	13.7 kg

商品コード	TAIS コード
726650	00122-000411

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

標準タイプ


BAL-1

自走式

ミキ

ノーパンクタイヤの
スタンダード車いす

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

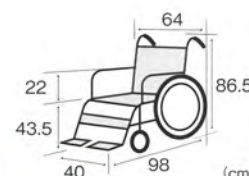ノーパンク
タイヤ

- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 33.5cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	64 cm	43.5 cm	12.9 kg

商品コード	TAIS コード
726695	00122-000451

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

軽量タイプ


エアリアル MW-SL1

自走式

松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

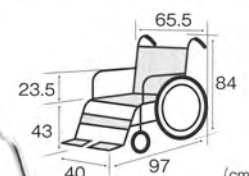

- 前輪: 6インチ
- 後輪: 22インチ
- 折りたたみ幅: 35cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65.5 cm	43 cm	11 kg

商品コード	TAIS コード
726530	00066-000182

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル受け金具、延長棒

非課税

幅狭タイプ

モック MOC-43LTP


自走式

ミキ

軽量かつコンパクトな車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

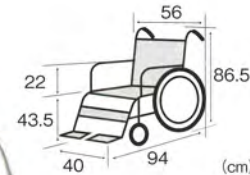

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：30cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	43.5 cm	11.2 kg

商品コード 726135 TAISコード 00122-000360

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

軽量タイプ/幅狭タイプ

NEXT CORE (自走) NEXT-11B

自走式


松永製作所

次世代の標準型車椅子

- 屋内でも屋外でも使いやすい
スリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える！
「立体スリングシート」



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

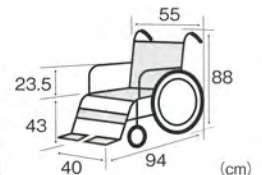

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：29cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	43 cm	11.8 kg

商品コード 726725 TAISコード 00066-000315

非課税

標準タイプ

AR-500

自走式


松永製作所

耐荷重 100kg

移乗も楽な多機能型



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

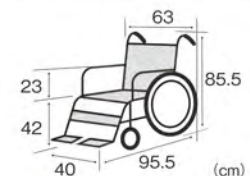

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63 cm	42 cm	16.6 kg

商品コード 726050 TAISコード 00066-000186

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガートル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

非課税

軽量タイプ

軽 8W NA-L8W (自走)

自走式

日進医療器


とにかく超軽量

安全移乗の

スイングアウト・ハネアゲ付



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整	アームサポート	跳ね上げ		
フット・レッグサポート	着脱	フット・レッグサポート	スイングアウト		
バックサポート	張り調整	座シート	奥行調整		

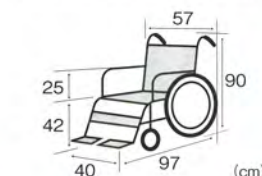

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：31cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	57 cm	42 cm	12 kg

商品コード 726720 TAISコード 00175-000273

非課税

自走式

低床タイプ

エアリアル MW-SL5


自走式

松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

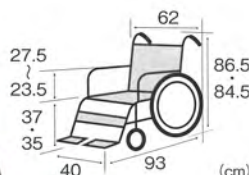

- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62 cm	35-37 cm	12.6 kg

商品コード TAISコード
726550 00066-000237

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

幅広タイプ

KJP-4


自走式

ミキ

体重の重い方用ビッグサイズ車いす
身体が大きい方に最適な130kg対応

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

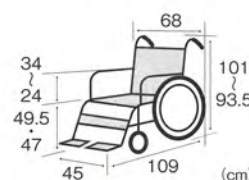

- 前輪：8インチ
- 後輪：24インチ
- 折りたたみ幅：38cm

座幅	全幅	前座高	重量
45 cm	68 cm	47-49.5 cm	20.2 kg

商品コード TAISコード
726137 00122-000345

非課税

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

各種オプションをご用意しております。51ページをご覧ください。

低床タイプ

エアリアル MW-SL5BT


自走式

松永製作所

自動ブレーキシステム
「立ち止まり君」付低床車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

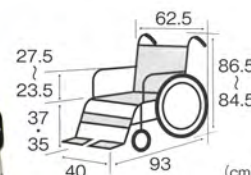

- 前輪：5インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：38.5cm

※この機能は駐車ブレーキの補助をするものであり代替するものではありません。
※ご利用者の体重や座る姿勢によっては自動ロックが解除されないケースがございます。

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	62.5 cm	35-37 cm	16.1 kg

商品コード TAISコード
726555 MATSUNAGAS-MW-SL5BT

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

6輪車タイプ

タイトターン TT-01


自走式

松永製作所

室内用6輪で足こぎに適した
開き式フット・レッグサポート付

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

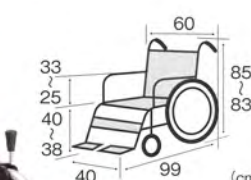

- 前輪：4インチ
- 後輪：20インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60 cm	38-40 cm	16.9 kg

商品コード TAISコード
726240 00066-000154

非課税

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

特殊寝台

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

体位変換器具

徘徊感知機器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

簡易モジュールタイプ

MYU4-22


自走式

ミキ

座り心地、こぎやすさを
追求しました



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

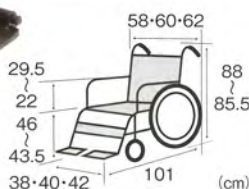

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：34.5cm

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38・40・42 cm	58・60・62 cm	43.5~46 cm	16.2 kg

座幅	商品コード	TAIS コード
38cm 幅	726582	00122-000302
40cm 幅	726584	00122-000302
42cm 幅	726588	00122-000302

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (自走)


自走式

日進医療器

多彩な調整機能
拭き取りやすい
ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

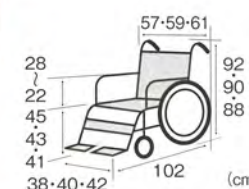

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：36cm

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38・40・42 cm	57・59・61 cm	41・43・45 cm	15.8 kg

座幅	商品コード	TAIS コード
38cm 幅	726331	00175-000279
40cm 幅	726330	00175-000279
42cm 幅	726332	00175-000279

●オプション…延長棒

非課税

モジュールタイプ

EX-M3 (自走)


自走式

日進医療器

幅広い寸法に対応可能
自分だけのぴったり寸法の
車いすを!



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

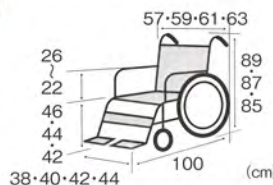

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折りたたみ幅：37cm



※ EX-M もご利用しております。

座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38・40・42・44 cm	57・59・61・63 cm	42・44・46 cm	15.8 kg

商品コード	TAIS コード
726212	00175-000277

●オプション…延長棒

非課税

車いす

特殊食台

特殊食台付履物

手すり防止用具

体位変換器

徘徊感知機器

目覚まし器

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付属品

スロープ

移動用リフト

介助式

各種オプションは51ページをご覧ください。

標準タイプ

KK-T545 介助式


パラマウントベッド

シートカラーが選べる
車いすのスタンダード!

ピンク

ブルー

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

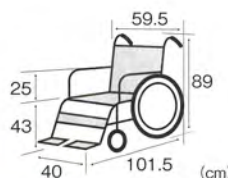

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：30cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59.5 cm	43 cm	14.3 kg

色	型式	商品コード	TAISコード
ブルー	KK-T545MA	728445	00170-000644
ピンク	KK-T545MM	728450	00170-000645

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル受け金具、ボンベ架(跳ね上げ用)、杖入れ、延長棒

非課税


標準タイプ

BAL-2 介助式

ミキ

ノーパンクタイヤの
スタンダード車いす

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

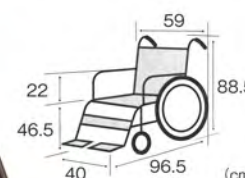

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	59 cm	46.5 cm	11.5 kg

商品コード	TAISコード
728455	00122-000452

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税


幅狭タイプ

スキット2 SKT-2 介助式

ミキ

超コンパクトな介助用車いす
スキッと押せて移動できます

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

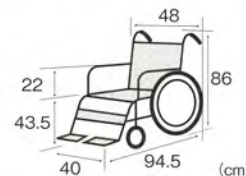

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：20cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	12.7 kg

商品コード	TAISコード
728405	00122-000320

●オプション…スマートヘッドサポート、延長棒

非課税


軽量タイプ

エアリアル MW-SL2 介助式

松永製作所

持ち運びが楽な
アルミ製超軽量タイプ

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

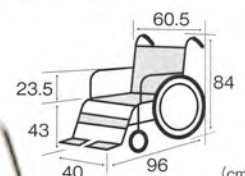

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33.5cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	60.5 cm	43 cm	10 kg

商品コード	TAISコード
728330	00066-000181

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、後方ガードル受け金具、延長棒

非課税

軽量タイプ


TH-2SB 介助式

日進医療器

軽量かつコンパクトな
介助用車いす



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

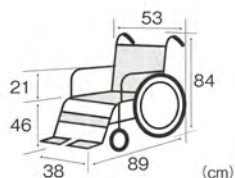

- 前輪：5インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm

座幅	全幅	前座高	重量
38cm	53cm	46cm	9.8kg

商品コード 728260 TAISコード 00175-000113

非課税

軽量タイプ／幅狭タイプ

NEXT CORE(介助) NEXT-21B 介助式


松永製作所

次世代の標準型車椅子

- 屋内でも屋外でも使いやすい
スリム&軽量車いす
- 3次元(3D)で姿勢を整える！
「立体スリングシート」



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

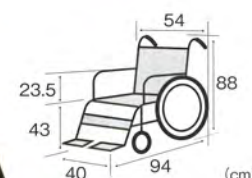

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：28cm

座幅	全幅	前座高	重量
40cm	54cm	43cm	10.8kg

商品コード 728480 TAISコード 00066-000316

非課税

軽量タイプ


NAH-L7 介助式

日進医療器

7kg台を実現した
超々軽量の介助式車いす



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

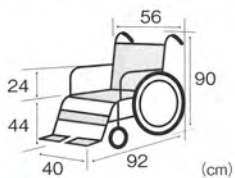

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：28cm

座幅	全幅	前座高	重量
40cm	56cm	44cm	7.8kg

商品コード 728220 TAISコード 00175-000169

非課税

軽量タイプ


軽7W NAH-L7W(介助) 介助式

日進医療器

とにかく超軽量
安全移乗の
スイングアウト・ハネアゲ付



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

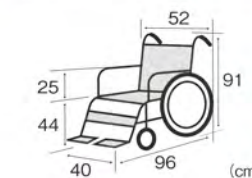

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm

座幅	全幅	前座高	重量
40cm	52cm	44cm	10.2kg

商品コード 728465 TAISコード 00175-000255

非課税

介助式

標準タイプ

AR-600

介助式


松永製作所

耐荷重 100kg

移乗も楽な多機能型



屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ	フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整		

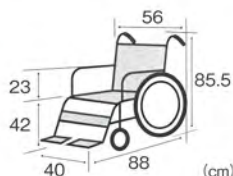

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：27cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	42 cm	15.2 kg

商品コード	TAISコード
728025	00066-000185

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、ポンベ架（跳ね上げ用）、杖入れ、延長棒

非課税

低床タイプ


エアリアル MW-SL6

介助式

松永製作所

足こぎやクッション併用可の
超低床・軽量

屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ	フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整		

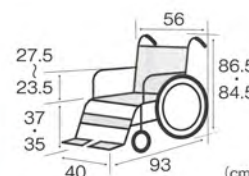

- 前輪：5インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：33cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	56 cm	35-37 cm	11.8 kg

商品コード	TAISコード
728350	00066-000238

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、後方ガードル受け金具、延長棒

非課税

標準タイプ


ラクーネ3 LK-3

介助式

ミキ

身体を持ち上げなくても
横からの移乗が簡単にでき、
ベッド等への移乗負担を軽減

屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ	フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整		

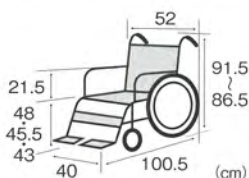

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：25cm

座幅	全幅	前座高(固定)	重量
40 cm	52 cm	43-45.5-48 cm	15 kg

商品コード	TAISコード
728475	00122-000486

非課税

6輪車タイプ


スキット 6 輪 SKT-6

介助式

ミキ

小回り抜群な介助用6輪車です
機能満載
65cm幅の廊下を曲がれます

屋内	A B C D E	屋内	A B C D E
屋外	A B C D E	屋外	A B C D E
アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ	フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整		

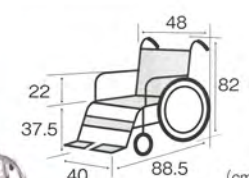

- 前輪：4インチ
- 後輪：14インチ
- 折り畳み幅：24cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	37.5 cm	14.7 kg

商品コード	TAISコード
728410	00122-000375

●オプション…スマートヘッドサポート

非課税

簡易モジュールタイプ

NA-3DX (介助)

介助式

日進医療器


多彩な調整機能

拭き取りやすい

ウレタンレザーシートも人気です



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

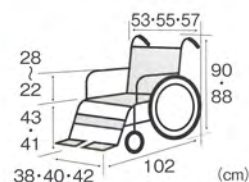

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：30cm

座幅(固定)	全幅	前座高	重量
38-40-42 cm	53-55-57 cm	41-43 cm	14.6 kg

座幅	商品コード	TAISコード
38cm幅	726337	00175-000280
40cm幅	726336	00175-000280
42cm幅	726338	00175-000280

●オプション…延長棒

非課税

モジュールタイプ

EX-M3 (介助)

介助式

日進医療器


幅広い寸法に対応可能

自分だけのぴったり寸法の

車いすを!



アームサポート	アームサポート
高さ調整	跳ね上げ
フット・レッグサポート	フット・レッグサポート
着脱	スイングアウト
バックサポート	座シート
張り調整	奥行調整

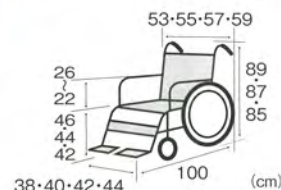

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：36cm

座幅(調整)	全幅	前座高	重量
38-40-42-44 cm	53-55-57-59 cm	42-44-46 cm	15 kg

商品コード	TAISコード
728435	00175-000278

●オプション…延長棒

非課税

車いす

特殊寝台

特殊寝台付履物 床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知器

自動排泄処理装置

手すり

歩行補助つえ

歩行器

車いす

車いす付履物

スロープ

移動用リフト

リクライニング式

各種オプションは51ページをご覧ください。

ティルト

SKT-7 ティルト式

ミキ

全幅48cmのティルト式車いす



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- 折りたたみ幅：32cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	48 cm	43.5 cm	19 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	—	92 cm	

商品コード 728440 TAISコード 00122-000433

●オプション…延長棒

非課税

リクライニング／ティルト

マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D

リクライニング・ティルト式

松永製作所

折りたたみ可能で全幅53cmと
スリムなティルト&リクライニング車いす
側彎にも対応可能な3Dシート



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ
- 折りたたみ幅：32.5cm

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	53 cm	43-45 cm	24.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	108.5 cm	

商品コード 730205 TAISコード 00066-000307

●オプション…S&Eユニット、延長棒

非課税

リクライニング／ティルト

MH-4RE(エレベーター付)


リクライニング・ティルト式

松永製作所

座位を安定させる
ティルト&リクライニング



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				

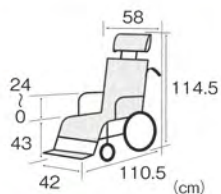

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
42 cm	58 cm	43 cm	23.4 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	90~125°	107 cm	

商品コード 730120 TAISコード MATSUNAGAS-MH-4RE

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト

非課税

リクライニング／ティルト

エリーゼ FR-31TR

リクライニング・ティルト式

松永製作所

横動きできる
フルリク&ティルトタイプ



屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E
アームサポート	高さ調整				
アームサポート	跳ね上げ				
フット・レッグサポート	着脱				
フット・レッグサポート	スイングアウト				
バックサポート	張り調整				
座シート	奥行調整				



- 前輪：6インチ
- 後輪：12インチ

※ビニールレザー仕様

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	65 cm	47.5 cm	36.5 kg
ティルト角度	リクライニング	ハンドル高さ	
0~30°	100~175°	94.4 cm	

商品コード 730045 TAISコード 00066-000251

非課税

リクライニング/ティルト

オアシス(自走)OS-11TRS

ティルト&リクライニング連動式


松永製作所

座位の不安定な方も座れる
超コンパクト

ティルト&リクライニング連動式車いす



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

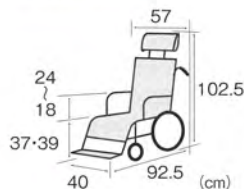

- 前輪：5インチ
- 後輪：18インチ
- 折りたたみ幅：35cm

座幅 40 cm	全幅 57 cm	前座高 37-39 cm	重量 23.5 kg
-------------	-------------	-----------------	---------------

ティルト角度 0~25°	リクライニング 90~115°	ハンドル高さ 101.5 cm
-----------------	--------------------	--------------------

商品コード 726630	TAISコード 00066-000280
-----------------	-------------------------

●オプション…S&Eユニット、ワンタッチプラスチックベルト、延長棒

非課税


リクライニング/ティルト

ハンディコンフォート KZ-B14001

リクライニング・ティルト式

パラマウントベッド

最適な姿勢を保持し、
座位が不安定な方も快適に
座れます

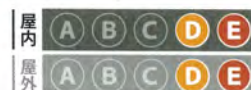

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 前輪：5インチ
- 後輪：12インチ

ノーバンク
タイヤ

座幅 42 cm	全幅 64 cm	前座高 40 cm	重量 29 kg
-------------	-------------	--------------	-------------

ティルト角度 0~18°	リクライニング 90~120°	ハンドル高さ 93~105 cm
-----------------	--------------------	---------------------

商品コード 730155	TAISコード 00170-000499
-----------------	-------------------------

非課税

ティルト

MP-Ti F VL


ティルト式

ミキ

コンパクトで使い易いティルト車いす
前ずれ・体幹横倒れに心配な方に有効



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

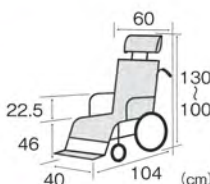

- 前輪：6インチ
- 後輪：16インチ

座幅 40 cm	全幅 60 cm	前座高 46 cm	重量 19.8 kg
-------------	-------------	--------------	---------------

ティルト角度 0~30°	リクライニング —	ハンドル高さ 94 cm
-----------------	--------------	-----------------

商品コード 728390	TAISコード 00122-000301
-----------------	-------------------------

●オプション…延長棒

非課税

リクライニング

MW-14B


リクライニング式

松永製作所

持ち運びも可能な
リクライニングタイプ



アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フット・レッグサポート 着脱	フット・レッグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

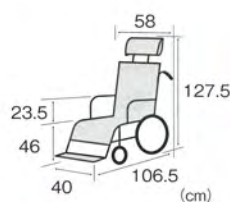

- 前輪：7インチ
- 後輪：16インチ
- 折りたたみ幅：26cm

座幅 40 cm	全幅 58 cm	前座高 46 cm	重量 16.1 kg
-------------	-------------	--------------	---------------

ティルト角度 —	リクライニング 90~160°	ハンドル高さ 83.4 cm
-------------	--------------------	-------------------

商品コード 730010	TAISコード 00066-000042
-----------------	-------------------------

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト、テーブルマジック式、延長棒

非課税

電動カート

セニアカー(四輪) ET-4F

電動カート

スズキ

カンタン便利
楽しい毎日

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整



- 速度範囲：2.0～6.0km/h
- 走行距離：33km
- 充電時間：2～12h

実用登坂 角度	段差乗り越え 高さ	溝乗り越え 幅	耐荷重	重量
10°	7.5 cm	10 cm	100 kg	98 kg

商品コード	TAISコード
732***	00152-000013

*商品コードは地域によって異なります。

非課税

電動

タウニジジョイ TJ-OP


電動

ヤマハ

「トイレまでは自分で」
そういう意思を叶えます

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

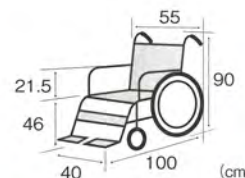

- 前輪：7インチ
- 後輪：16インチ
- 折り畳み幅：34cm
- 速度範囲：2.5～4.5km/h
- 走行距離：10km
- 充電時間：2.5h
- ※介助操作部付き

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	55 cm	46 cm	22 kg

商品コード	TAISコード
732065	00233-000040

(バッテリー含まず)



非課税

電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行者と扱われるためには、道路交通法施行規則上の基準を満たす必要があります。

車体の大きさ基準

- 全長、全幅、全高のいずれも、以下の基準値以内である必要があります。
全長：120cm、全幅：70cm、全高：109cm

- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を所轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等により止むを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行者の扱いとなります。
なお、利用者は確認証を携帯する必要があります。

- すでにご利用中の電動車いすに関しても同様に、この基準や確認手続き等は適用されます。当面の間は、直ちに道路交通法違反とはされず、通行中に、この確認を受けるよう指導されるに止まる運用がなされますが、歩行者と扱われるためには確認手続きが必要なことには変わりありません。

- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取付けることにより基準値を超える場合があります。

速度基準

- 時速が6km以内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いすの速度(メーカー公表値)は、すべて6km/h以内です。

電動

MY-1JWX


電動

松永製作所

高性能でコンパクトな
電動車いす

屋内	A	B	C	D	E
屋外	A	B	C	D	E

アームサポート 高さ調整	アームサポート 跳ね上げ
フットレグサポート 着脱	フットレグサポート スイングアウト
バックサポート 張り調整	座シート 奥行調整

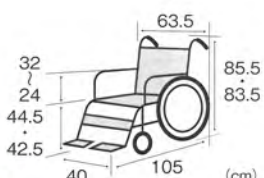

- 前輪：6インチ
- 後輪：22インチ
- 折り畳み幅：37cm
- 速度範囲：1.7～4.5km/h
- 走行距離：15km
- 充電時間：2～3h

※地域によっては対応が出来ない場合もございます。

座幅	全幅	前座高	重量
40 cm	63.5 cm	42.5-44.5 cm	31.8 kg

商品コード	TAISコード
732155	MATSUNAGAS-MY-1JWX

●オプション…延長棒

非課税

※☎のマークのついた商品は、お問い合わせください。

車いすオプション／車いすオプション適合表

車いすオプション

※ 車いすオプションは下記車いすオプション適合表をご覧ください。

S&E ユニット 松永製作所  商品コード 990537 TAIS コード 00066-000297	テーブル マジック式 松永製作所  商品コード 766080 TAIS コード 00066-000205	スマートヘッドサポート ミキ  商品コード 766075 TAIS コード 00122-000461
ワンタッチプラスチックベルト 松永製作所  商品コード 766005 TAIS コード 00066-000201	後方ガードル受け金具 松永製作所  商品コード 766090 TAIS コード 00066-000209 ※地域によっては対応が出来ない場合もございます。	ボンベ架(跳ね上げ用) 松永製作所  商品コード 766040 TAIS コード 00066-000261
杖入れ(大) 松永製作所  商品コード 766085 TAIS コード 00066-000211	延長棒(+15cm) 松永製作所  商品コード 765510 TAIS コード 00066-000298	延長棒(+10cm) ミキ  商品コード 765645 TAIS コード 00122-000426
		延長棒(+16cm) 日進医療器  商品コード 765605 TAIS コード 00175-000285

車いすオプション適合表

頁	型式	オプション							
		S&E ユニット	ワンタッチプラスチックベルト	スマートヘッドサポート	テーブルマジック式	後方ガードル受け金具	ボンベ架(跳ね上げ用)	杖入れ	延長棒
40	KK-T540	—	○	—	○	○	○	○	○(松永製作所)
	BAL-1	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	SKT-4	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	MW-SL1	—	○	—	○	○	—	—	○(松永製作所)
41	MOC-43LTP	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	AR-500	○	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)
42	MW-SL5	—	○	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	MW-SL5BT	—	○	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
	KJP-4	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	TT-01	○	○	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
43	MYU4-22 (38)	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	MYU4-22 (40)	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	MYU4-22 (42)	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	NA-3DX (自走) (38)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (自走) (40)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (自走) (42)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	EX-M3 (自走)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
44	EX-M	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	KK-T545	—	○	—	○	○	○	○	○(松永製作所)
	BAL-2	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
	SKT-2	—	—	○	—	—	—	—	○(ミキ)
46	MW-SL2	—	○	—	○	○	—	—	○(松永製作所)
	AR-600	○	○	—	—	○	○	○	○(松永製作所)
	MW-SL6	—	○	—	—	○	—	—	○(松永製作所)
	SKT-6	—	—	○	—	—	—	—	—
47	NA-3DX (介助) (38)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (介助) (40)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	NA-3DX (介助) (42)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
	EX-M3 (介助)	—	—	—	—	—	—	—	○(日進医療器)
48	SKT-7	—	—	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	MH-CR3D	○	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	MH-4RE	—	○	—	—	—	—	—	—
49	OS-11TRS	○	○	—	—	—	—	—	○(松永製作所)
	MP-Ti F VL	—	—	—	—	—	—	—	○(ミキ)
	MW-14B	—	○	—	○	—	—	—	○(松永製作所)
50	MY-1JWX	—	—	—	—	—	—	—	○(松永製作所)

寸法・機能一覧

頁	型式	タイプ	各部サイズ							
			重量	座幅	前座高	肘高	全幅	全高	全長	折り畳み幅
			kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
40	KK-T540	標準	15.7	40	43	25	67	89	102	35
	BAL-1	標準	12.9	40	43.5	22	64	86.5	98	33.5
	SKT-4	幅狭	13.7	40	43.5	22	55	86	98	28.5
	MW-SL1	軽量	11	40	43	23.5	65.5	84	97	35
41	MOC-43LTP	幅狭	11.2	40	43.5	22	56	86.5	94	30
	NEXT-11B	軽量／幅狭	11.8	40	43	23.5	55	88	94	29
	AR-500	標準	16.6	40	42	23	63	85.5	95.5	34
	NA-L8W	軽量	12	40	42	25	57	90	97	31
42	MW-SL5	低床	12.6	40	35/37	23.5-27.5	62	84.5-86.5	93	38
	MW-SL5BT	低床	16.1	40	35/37	23.5-27.5	62.5	84.5-86.5	93	38.5
	KJP-4	幅広	20.2	45	47-49.5	24-34	68	93.5-101	109	38
	TT-01	6輪車	16.9	40	38-40	25-33	60	83-85	99	32.5
43	MYU4-22 (38)	簡易モジュール(小)	16.2	38	43.5/46	22-29.5	58	85.5-88	101	34.5
	MYU4-22 (40)	簡易モジュール	16.2	40	43.5/46	22-29.5	60	85.5-88	101	34.5
	MYU4-22 (42)	簡易モジュール(大)	16.2	42	43.5/46	22-29.5	62	85.5-88	101	34.5
	NA-3DX (自走) (38)	簡易モジュール	15.8	38	41/43/45	22-28	57	88/90/92	102	36
	NA-3DX (自走) (40)	簡易モジュール	15.8	40	41/43/45	22-28	59	88/90/92	102	36
	NA-3DX (自走) (42)	簡易モジュール	15.8	42	41/43/45	22-28	61	88/90/92	102	36
	EX-M3 (自走)	モジュール	15.8	38/40/42/44	42/44/46	22-26	57/59/61/63	85/87/89	100	37
	EX-M	モジュール	15.4	38/40/42/44	42/44/46	22-26	56-62	86-90	99	37-43
44	KK-T545	標準	14.3	40	43	25	59.5	89	101.5	30
	BAL-2	標準	11.5	40	46.5	22	59	88.5	96.5	27
	SKT-2	幅狭	12.7	40	43.5	22	48	86	94.5	20
	MW-SL2	軽量	10	40	43	23.5	60.5	84	96	33.5
45	TH-2SB	軽量	9.8	38	46	21	53	84	89	24
	NEXT-21B	軽量／幅狭	10.8	40	43	23.5	54	88	94	28
	NAH-L7	軽量	7.8	40	44	24	56	90	92	28
	NAH-L7W	軽量	10.2	40	44	25	52	91	96	25
46	AR-600	標準	15.2	40	42	23	56	85.5	88	27
	MW-SL6	低床	11.8	40	35/37	23.5-27.5	56	84.5-86.5	93	33
	LK-3	標準	15	40	43/45.5/48	21.5	52	86.5-91.5	100.5	25
	SKT-6	6輪車	14.7	40	37.5	22	48	82	88.5	24
47	NA-3DX (介助) (38)	簡易モジュール	14.6	38	41/43	22-28	53	88/90	102	30
	NA-3DX (介助) (40)	簡易モジュール	14.6	40	41/43	22-28	55	88/90	102	30
	NA-3DX (介助) (42)	簡易モジュール	14.6	42	41/43	22-28	57	88/90	102	30
	EX-M3 (介助)	モジュール	15	38/40/42/44	42/44/46	22-26	53/55/57/59	85/87/89	100	36
48	SKT-7	ティルト	19	40	43.5	22	48	94-121	99	32
	MH-CR3D	リクライニング・ティルト	24.5	40	43/45	20	53	108.5	99.5-108	32.5
	MH-4RE	リクライニング・ティルト	23.4	42	43	0-24	58	114.5	110.5	—
	FR-31TR	リクライニング・ティルト	36.5	40	47.5	0-24	65	124	118	—
49	OS-11TRS	リクライニング・ティルト	23.5	40	37/39	18-24	57	91	90.5	35
	KK-ZHC001	リクライニング・ティルト	29	42	40	23-33	64	107-127	90-123	—
	MP-Ti F VL	ティルト	19.8	40	46	22.5	60	100-130	104	38
	MW-14B	リクライニング	16.1	40	46	23.5	58	127.5	106.5	26
50	ET-4F	電動カート	98	—	—	—	65	108	119.5	—
	MY-1JWX	電動	31.8	40	42.5/44.5	24-32	63.5	83.5/85.5	105	37
	TJ-OP	電動	22	40	46	21.5	55	90	100	34

キャスト	タイヤ(後輪)			機能						
	径	タイヤ幅	エア タイヤ	手元 ブレーキ	介護 ブレーキ	アーム サポート	フット・レッグ サポート	バック サポート	シート ベルト	クッション
	インチ	cm				可動式	可動式	張調整		
6	22	3.3	○	○	○	—	—	—	—	○
6	22	3.1	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.3	○	○	○	○	○	○	—	○
6	22	2.2	○	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.3	○	○	○	—	—	—	—	—
6	22	2.8	○	○	○	—	—	○	—	○
6	22	3.3	○	○	○	○	○	—	—	—
6	22	2.5	○	○	○	○	○	—	—	—
5	20	2.2	○	○	○	○	○	—	—	—
5	20	2.2	○	○	○	○	○	—	—	○
8	24	3.1	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
4	20	3.3	○	○	—	—	○	—	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	22	3.4	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.1	○	○	○	—	—	—	—	○
6	16	3.8	ノーパンク	○	○	—	—	—	—	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.9	○	○	○	—	—	—	—	—
5	14	4.0	○	○	○	—	—	—	—	—
6	16	3.1	○	○	○	—	—	○	—	○
6	14	3.7	○	—	○	—	—	—	—	—
6	14	3.7	○	○	○	○	○	—	○	—
6	16	3.1	○	○	○	○	○	—	—	—
5	16	3.9	○	○	○	○	○	—	—	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
4	14	3.8	ノーパンク	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	16	3.5	○	○	○	○	○	○	—	—
6	14	3.8	○	○	○	○	○	○	—	○
6	12	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
6	16	3.3	○	足踏ブレーキ	○	○	○	○	—	○
6	12	2.9	○	足踏ブレーキ	—	○	—	○	—	○
5	18	3.3	○	○	○	○	○	○	—	○
5	12	5.0	ノーパンク	—	○	○	○	○	—	○
6	16	3.8	○	○	○	○	○	○	—	—
7	16	3.1	○	○	○	○	—	—	○	—
—	—	7.6	ノーパンク	—	—	○	—	—	—	○
6	22	3.1	○	○	○	○	○	○	○	○
7	16	6.35	○	—	○	○	○	—	—	—

車いす用クッションの選び方

利用者状態別選定ポイント

Bさん



屋外の車いす使用時などに衝撃を吸収するために除圧系のクッションが必要です。

Dさん



座り直しに努力を要する方です。圧分散は必須となります。姿勢保持は、背もたれと座面両面から考慮しましょう。移乗等の動きを助けるために、足が床に届くようにクッションを含めた座面高の考慮が必要です。

Cさん




座り直しは可能な方ですが、骨盤を安定させるために姿勢保持用のクッションの使用を検討しましょう。車いすを駆動する場合には駆動の動きを考慮したクッションが必要です。

Eさん



座り直しができない方です。車いすのタイプにもよりますが、圧分散、姿勢保持を背もたれと座面の両面から考慮しましょう。麻痺や変形があれば、クッション側にも調整機能のあるものがよいでしょう。

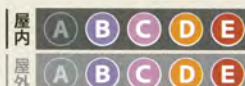

このマークを目安に選べます。

「車いす」で快適に過ごすために

車いすに快適に「座る」ためには、圧分散・姿勢保持、「動く・移動する」ためには、動きを助けるという要素を考慮する必要があります。使用する車いすの座面によっては、必要とされる要素を満たせていない場合がございますので、車いす用クッションの導入をご検討ください。

クッションの目的

①圧分散 ②姿勢保持 ③動きを助ける

クッションの選定

上記の使用目的すべてを満たすような万能のクッションはありません。

何を優先すべきか? 考えて選定することが大切です。また、使用する車いすとの兼ね合いも考慮に入れましょう。

※クッションは「座布団」では代用できません。専用のものを使用しましょう。



座りなおし

不十分

簡易な除圧系のクッション
(除圧のみ)

除圧タイプ

できない

骨盤の安定性

不十分

坐骨の前方支えのあるクッション
(姿勢保持と圧分散)

骨盤安定タイプ

ない

麻痺や変形

軽度・予測される

坐骨の前方支えと背もたれクッションの併用
(姿勢保持と圧分散)

骨盤安定タイプと背もたれ保持タイプ

ある

床ずれの危険性

少ない・ある

坐骨の前方支えと背もたれクッションを併用し、セルやエアによる調整機能も必要(姿勢保持と圧分散)

骨盤、背もたれ調整タイプ

※上記はあくまで目安です。身体の状態、使用目的、使用する車いすによって検討が必要です。専門家にご相談ください。

フォーム

アルファブラクッション KC-WP4040

タイカ

Point1

体圧分散性能

しっかり支える。ウレタンフォームの特殊スリットとゲルの力で広く、低圧に。

Point2

座位保持機能

お尻になじむ、だから抜群の座り心地に。



厚さ 6cm 重量 0.6 kg



商品コード TAISコード
760005 00563-000017

●サイズ: 幅40×奥行40cm
●材質(中身): αGEL、ウレタンフォーム

フォーム



リフレア

日進医療器

適度な通気性でムレにくい
正しい姿勢を保ってズレを低減
体をしっかり支えて体圧を分散



厚さ 7.5cm 重量 0.5 kg

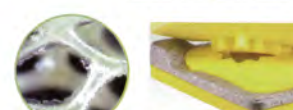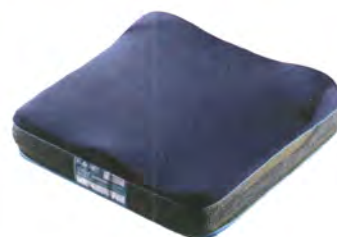

無膜処理されたウレタンフォーム

商品コード TAISコード
762080 00175-000223

●サイズ: 幅39×奥行39cm
●材質(中身): 高透气・低反発ウレタンフォーム

ジェル

ベスポジェルクッション CK-375

ケーブル

前後で厚みを変えることで
沈み込みの度合いが異なり
前ずれ防止や足こぎサポートにも対応



厚さ 6.5cm
重量 1.6kg



商品コード 762085
TAISコード 00206-000072

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタンジェル、ウレタンフォーム

ジェル

Gel-T クッション CK-346

ケーブル

前ズレ、横ズレを防ぎ、
流動性のジェルが瞬間的なズレに対応
車いす上で可動する機会の多い方に



厚さ 5cm
重量 2.5kg



商品コード 760000
TAISコード 00206-000006

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ウレタンフォーム、ナトリウムアクリル樹脂、流動ジェル

ジェル

リバティクッション

ラックヘルスケア

動きやすさと安全性を追求
身体の形状に合わせて柔軟になじみ、
姿勢をサポートします



厚さ 4cm
重量 0.6kg



商品コード 762095
TAISコード 00245-000078

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：強化ナイロン、シリコンゲル



ジェル

アクションパッド # 9000

アクションジャパン

厚さ2.5cmでも
底づきしないで圧力を分散



厚さ 2.5cm
重量 4.5kg



商品コード 760060
TAISコード 00428-000005

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：アクトンドライポリマー

ジェル

アウル40 プラスレザー OWL40P-L

加地

EXGELが体を優しくサポート
アウル形状が身体に
心地よくフィット



厚さ 5.5cm
重量 1.1kg



商品コード 760019
TAISコード 00540-000013

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル（合成ゴム）、ウレタンフォーム

エア+フォーム

バリライトソロストレータス 56630

ユーキ・トレーディング

座位保持と
座り心地の良さを追求



厚さ 7.5cm
重量 0.75kg



商品コード 762060
TAISコード 00468-000002

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：IFD フォーム

※☎のマークのついた商品は、お問い合わせください。

車いす用クッション

エア+フォーム

リフレックス

ユーキ・トレーディング

クッションに座ると自動的に空気が
抜け、お尻の形に合わせます

座クッションの特長

バルブ内蔵型エアークッション



厚さ	7.5cm
重量	0.72kg



商品コード	TAIS コード
762065	00468-000034

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリウレタン、ポリエステル

フォーム

FC- アジャスト 標準セット

アイ・ソネックス

大腿パット着脱式で足駆動に便利

座クッションの特長

足駆動する方は、大腿パットを
はずすと前座を低くできます。

背/厚さ	2cm
背/重量	0.69kg

座/厚さ	8.5cm
座/重量	1.3kg



商品コード	TAIS コード
760045	00149-000008

- 座/●サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：ポリエチレンフォーム、
低反発高密度特殊ウレタン
- 背/●サイズ：幅39.5×背高さ41cm
- 材質（中身）：ポリエチレンフォーム

ジェル

エクスジェル サポートセット ASK-00

加地

姿勢を固定から
心地よい安定へ

座/厚さ	前10cm・後7cm
座/重量	1.3kg

背/厚さ	11.5cm
背/重量	0.9kg



商品コード	TAIS コード
760040	00540-000006

- 座/●サイズ：幅40×奥行41.5cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム、
発泡ポリエチレン
- 背/●サイズ：幅46×背高さ37cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム



エア

ロホクッション ロータイプ

アビリティーズ・ケアネット

ご自分で座位のとれる方に最適



厚さ	5cm
重量	0.85kg



●この商品には、カバーが付きません。

商品コード	TAIS コード
762000	00249-000049

- サイズ：幅38×奥行38cm
- 材質（中身）：耐失禁ネオブレンドカバー

ジェル

アウルサポートセット OWLS-S01B01

加地

EXGEL が身体をやさしく支え、
座位バランスのサポート力をアップ

背/厚さ	12cm
背/重量	1.4kg

座/厚さ	前7cm・後5cm
座/重量	1.2kg



●この商品には、カバーが付きません。


商品コード	TAIS コード
760015	00540-000017

- 座/●サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム
- 背/●サイズ：幅48×背高さ36.5cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム

ジェル

エクスジェル マルチクッション AEK-01R

加地

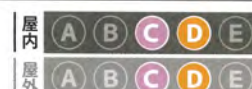

厚さ	4.5cm
重量	1.7kg



●この商品には、カバーが付きません。

商品コード	TAIS コード
760020	00540-000002

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質（中身）：エクスジェル、ウレタンフォーム、
ウレタン合成皮革



※ ☎のマークのついた商品は、お問い合わせください。